



PRODUCTINFORMATIE RIB BAND




Dutch

Omschrijving: De Rib Band is een hoge kwaliteit ribbandage gemaakt van elastische stof. Eenvoudig te bevestigen en te verwijderen dankzij het praktische klittenbandsysteem. De ribband ondersteunt de buik spierweefsel en verzwakte. Ondersteunt de buikwand om te genezen na de operatie.

Maatvoering:

MAAT	BUIK OMTREK	ART.NR.
S	75 - 85 cm	PO 31420-D S
M	85 - 95 cm	PO 31420-D M
L	95 - 105 cm	PO 31420-D L
XL	105-115 cm	PO 31420-D XL
XXL	115 - 125 cm	PO 31420-D XXL

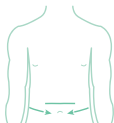

Indicaties: Ribcontusie, Ribfractuur, Pijnklachten van spieren (borstkas)

Gebruiksaanwijzing:

1. Pak beide uiteinden en doe de bandage van achter de rug, richting de buik vast met de klittenbandsluiting.
2. Zorg dat er voldoende spanning op de bandage staat, dat er ondersteuning gegeven wordt en er tegelijkertijd geen hinder ondervonden wordt bij het ademen.

Belangrijke informatie en waarschuwingen:

Dit medische product is bedoeld voor gebruik door één individuele patiënt. Het product dient te worden gebruikt in overeenstemming met het advies en de instructies van uw arts. De eerste keer dient het product door een getrainde professional aangelegd te worden.

In gevallen waarin het product door de arts wordt aangeraden om 's nachts te gebruiken, moet

men er zeker van zijn dat het de bloedcirculatie niet verhindert. Het product dient losgemaakt te worden in geval van gevoelloosheid en indien nodig worden verwijderd. Raadpleeg bij aanhoudende klachten uw arts.

Het product mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of vlammen. Contact met olie- of zuurhoudende stoffen of lotions met pommes moet worden vermeden.

Dit product mag niet buiten het toepassingsgebied worden gebruikt of gecombineerd worden met een ander product. Het mag alleen worden gebruikt volgens de oorspronkelijke indicaties.

Dagelijks gebruik en toepassingsduur dienen door de arts te worden bepaald. Overmatig en langdurig gebruik kan spierzwakte veroorzaken. Raadpleeg altijd uw arts voor het juiste draagschema.

Wasinstructies:



PRODUCT INFORMATION RIB BAND




English

Description: The Rib Band is a high quality rib bandage made of elastic fabric. Easy to attach and remove thanks to the practical Velcro system. The rib band supports the abdominal muscle tissue and weakened. Supports the abdominal wall to heal after surgery.

Sizing:

SIZE	BELLY SIZE	ART.NR.
S	75 - 85 cm	PO 31420-D S
M	85 - 95 cm	PO 31420-D M
L	95 - 105 cm	PO 31420-D L
XL	105-115 cm	PO 31420-D XL
XXL	115 - 125 cm	PO 31420-D XXL

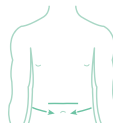

Indications: Rib contusion, Rib fracture, Pain in muscles (chest)

Manual:

1. Grab both ends and fasten the bandage from behind the back, towards the abdomen with the Velcro fastener.
2. Make sure that there is sufficient tension on the bandage, that support is given and at the same time there is no hindrance when breathing.

Important information and warnings:

This medical product is intended for use by one individual patient. The product should be used in accordance with your doctor's advice and instructions. The product should be installed by a trained professional the first time.

In cases where the product is recommended by the doctor to be used at night, it must be ensured that it does not interfere with blood circulation. The product should be detached in case of numbness and removed if necessary. Consult your doctor in case of persistent complaints.

The product should not be exposed to excessive heat or flame. Contact with oily or acidic substances or lotions containing pomades should be avoided.

This product must not be used outside its scope or combined with any other product. It should only be used according to the original indications.

Daily use and duration of application should be determined by the physician. Excessive and prolonged use can cause muscle weakness. Always consult your doctor for the correct wearing schedule.

Washing instructions:





INFORMATION PRODUIT RIB BAND




French

Description: Le Rib Band est un bandage de haute qualité en tissu élastique. Facile à attacher et à enlever grâce au système velcro pratique. La bande de côtes soutient le tissu musculaire abdominal et s'affaiblit. Soutient la paroi abdominale pour guérir après la chirurgie.

Dimensionnement:

DIMENSION	TOUR DE VENTRE	ART.NR.
S	75 - 85 cm	PO 31420-D S
M	85 - 95 cm	PO 31420-D M
L	95 - 105 cm	PO 31420-D L
XL	105-115 cm	PO 31420-D XL
XXL	115 - 125 cm	PO 31420-D XXL

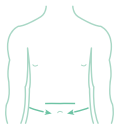

Indications: Contusion des côtes, Fracture des côtes, Douleur dans les muscles (thorax)

Manuel d'utilisation:

1. Saisissez les deux extrémités et attachez le bandage de derrière le dos vers l'abdomen avec la fermeture Velcro.
2. Assurez-vous que le bandage est suffisamment tendu, qu'il est soutenu et qu'en même temps, il n'y a pas d'obstacle à la respiration.

Informations importantes et avertissements:

Ce produit médical est destiné à être utilisé par un seul patient. Le produit doit être utilisé conformément aux conseils et aux instructions de votre médecin. Le produit doit être installé par un professionnel qualifié la première fois.

Dans les cas où le produit est recommandé par le médecin pour être utilisé la nuit, il faut s'assurer qu'il n'interfère pas avec la circulation sanguine. Le produit doit être détaché en cas d'engourdissement et retiré si nécessaire. Consultez votre médecin en cas de plaintes persistantes.

Le produit ne doit pas être exposé à une chaleur ou à une flamme excessive. Le contact avec des substances huileuses ou acides ou des lotions contenant des pommades doit être évité.

Ce produit ne doit pas être utilisé en dehors de son champ d'application ou combiné avec tout autre produit. Il ne doit être utilisé que selon les indications d'origine.

L'utilisation quotidienne et la durée d'application doivent être déterminées par le médecin. Une utilisation excessive et prolongée peut provoquer une faiblesse musculaire. Consultez toujours votre médecin pour connaître le calendrier de port correct.

Instructions de lavage:



PRODUKTINFORMATION RIB BAND




Deutsch

die Beschreibung: Das Rib Band ist eine hochwertige Rippbandage aus elastischem Gewebe. Einfaches Anbringen und Abnehmen dank praktischem Klettssystem. Das Rippenband unterstützt das Bauchmuskulgewebe und schwächt. Unterstützt die Abheilung der Bauchdecke nach der Operation.

die Bemessung:

GRÖSSE	BAUCHUMFANG	ART.NR.
S	75 - 85 cm	PO 31420-D S
M	85 - 95 cm	PO 31420-D M
L	95 - 105 cm	PO 31420-D L
XL	105 - 115 cm	PO 31420-D XL
XXL	115 - 125 cm	PO 31420-D XXL

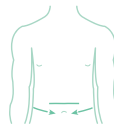

Indikationen: Rippenprellung, Rippenfraktur, Muskelschmerzen (Brust)

Gebrauchsanweisung:

1. Nehmen Sie beide Enden und befestigen Sie die Bandage von hinten in Richtung Bauch mit dem Klettverschluss.
2. Achten Sie darauf, dass die Bandage ausreichend gespannt ist, dass sie Halt gibt und gleichzeitig die Atmung nicht behindert wird.

Wichtige Informationen und Warnungen:

Dieses Medizinprodukt ist für die Anwendung durch einen einzelnen Patienten bestimmt. Das Produkt sollte gemäß den Anweisungen und Anweisungen Ihres Arztes verwendet werden.

Das Produkt sollte beim ersten Mal von einem geschulten Fachmann installiert werden.

Im Falle das Produkt vom Arzt zur nächtlichen Anwendung empfohlen wird, Sie achten, dass

es die Durchblutung nicht beeinträchtigt. Bei Taubheitsgefühl sollte das Produkt abgenommen und bei Bedarf entfernt werden. Bei anhaltenden Beschwerden wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Produkt sollte keiner übermäßigen Hitze oder Flamme ausgesetzt werden. Der Kontakt mit öligen oder sauren Substanzen oder pomadenhaltigen Lotionen sollte vermieden werden.

Dieses Produkt darf nicht außerhalb seines Geltungsbereichs verwendet oder mit anderen Produkten kombiniert werden. Es sollte nur gemäß den Originalindikationen verwendet werden.

Die tägliche Anwendung und die Anwendungsdauer sollten vom Arzt festgelegt werden. Übermäßiger und längerer Gebrauch kann Muskelschwäche verursachen. Fragen Sie immer Ihren Arzt nach dem richtigen Trageplan.

Waschanleitung:

